

àbas ONE

Special ONE shot for you





Ультразвуковой smas лифтинг лица и тела - одна из самых популярных процедур в сфере косметологии.

Причиной является безопасность и видимый эффект после первой же процедуры. Аппараты Nifu отличаются высокой эффективностью,

за счет использования своей уникальной технологии ультразвука, при этом стоит отметить качество и марку производителя.

Южная Корея является эталоном качества в сфере производства косметологических аппаратов.



➤ Почему отдается предпочтение HiFu?

Неинвазивное воздействие

Различная глубина проникновения в кожу

Отсутствие повреждений на поверхности кожи

Минимальный риск возникновения осложнений

➤ Преимущества аппарата ABAS One

Ресурс 150 000 вспышек

Позволяет обрабатывать все зоны лица: лоб, глаза, верхнюю губу – области, которые недоступны другим системам HiFu.

Возможность применения различных значений частоты (в МГц) для воздействия на определенную глубину тканей

Скорость генерации импульса выше, чем у других аппаратов, использующих HiFu. Время генерации импульса: 1,42 с (обычно 2 с)

- высокая скорость генерации импульса → снижение болевого эффекта
- сокращается время воздействия → пациент чувствует себя комфортно

ИННОВАЦИОННАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

Конструкция рукоятки позволяют проводить процедуру с большим удобством как для врача, так и для пациента.

БЕЗ РИСКА

Исключает риск получения ожогов из-за плотного прилегания картриджа к обрабатываемой рельефной поверхности.

БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Идеально прилегает к поверхности кожи даже в самых сложных для обработки зонах, что позволяет поводить процедуру быстро и безболезненно.

НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость сменного картриджа 1000 USD.



Индикатор состояния

Кнопка выстрела

Картридж

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙС

- Отображение всей информации о состоянии картриджа
- Легко проверить текущий отсчет выстрелов
- Выбирать и изменить параметр одним касанием




КАРТРИДЖИ


Аппарат AVAS One доставляет точное количество энергии HIFU до глубины фокуса → происходит генерация тепловой энергии (65~70 °С)

Глубина картриджей для лица и тела

- Позволяет выбирать индивидуальные значения частоты для каждой глубины
 - 1,5 мм → 9 МГц для верхнего слоя дермы
 - 3,0 мм → 7 МГц для глубокого слоя дермы
 - 4,5 мм → 4 МГц для слоя поверхностной мышечно-апоневротической системы лица
 - 6,5 мм → 4 МГц применяется для коррекции фигуры и подтяжки груди
- Обеспечивает максимальный эффект лифтинга и укрепления кожи благодаря выбору оптимальной частоты (МГц)
- Использует неабляционные технологии лифтинга и укрепления кожи, позволяет разглаживать морщины и бороться с дряблой кожей, имеет минимальное время реабилитации, минимальный риск возникновения нежелательных явлений и вызывает минимальный дискомфорт.

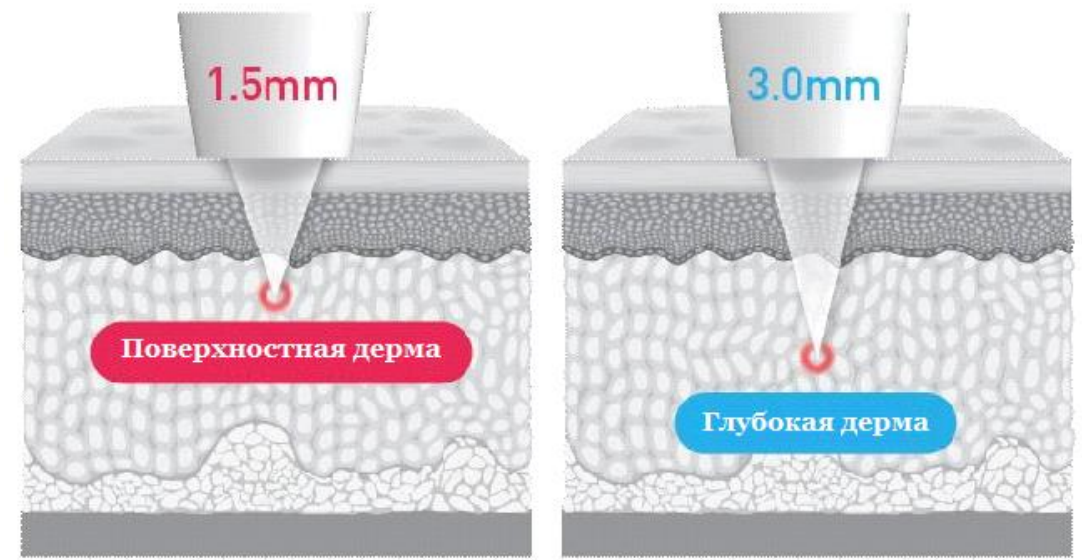

Базовый комплект

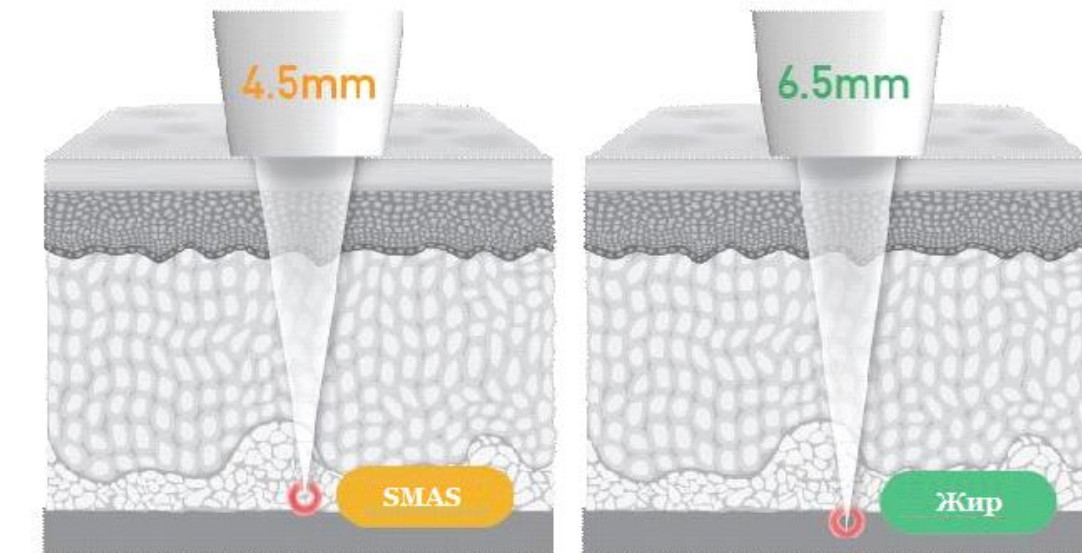

Базовый комплект

Опционно



Clinical data

	Базовая комплектация			Опционно
Глубина (mm)	1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm	6.5 mm
Частота (MHz)	7MHz	7MHz	4MHz	4MHz
Энергия (J)	0.1~0.2J (0.05J step)	0.1~1.0J (0.05J step)	0.1~1.5J (0.05J step)	0.1~1.5J (0.05J step)
Скорость выстрела	Single, 5, 7, 10 (Hz)			

В отличие от обычных методов лечения, аппарат SMAS лифтинга ABAS ONE обеспечивает менее болезненное и более эффективное лечение.

Кроме того, инновационная анатомические удобная рукоятка контактирует легко в трудно доступных местах на изогнутой области лица, такой как периорбитальный участок.



Почему мы?

Гарантия

Гарантия на аппарат составляет 12 месяцев

Доставка

Доставка до вашей двери абсолютна бесплатна, все расходы мы берем на себя, срок до 20 дней

Бесплатное обучение

Бесплатное обучение предоставляется при покупке аппарата.

Нужна ли лицензия?

SMAS аппарат является бытовым прибором и не требует для работы мед. образование.

Рассрочка без %/Кредит

Оформление займет всего 3 минуты, % по договору мы берем на себя, для вас стоимость за наличные или в рассрочку не меняется.

Своя сервисная служба

Наша сервисная служба всегда готова прийти к вам на помощь, потому что мы понимаем у вас клиенты и этот вопрос не отложить на 2-3 дня.

С нами вы можете связаться любым удобным для вас способом:

Телефон: +7(812) 984-89-81, +7(962) 684-89-81. WhatsApp: +7(962) 684-89-81, Эл. Почта: info@magicosmo.ru